

OPHTALMIC Sweet® 1 DAY

עדשות יומיות
נוחות מרבית ללא פשרות על בריאות העין



המבנה המקרומולקולרי של עדשות Ophthalmic Sweet 1 Day עבר אופטימיזציה מיוחדת כדי לאפשר איזון נכון בין מולקולות סיליקון למולקולות הידרופיליות. השילוב המאוזן של מבנה עדשות המגע מאפשר:

- גמישות טובה לשימוש נוח יחד עם עמידות מחוזקת מפני קרע
- שימור ושיפור הלחות על פני העדשה.
- מודולוס נמוך ואלסטיות משופרת עד 250%

כדי להבטיח נוחות מרבית מחסנית האחסון של עדשות OPHTALMIC SWEET 1 DAY מכילה חומר מגביר לחות המסייע להקטנת גורמי חיכוך.

השרשראות המובנות של מולקולות סיליקון בעדשות Ophthalmic Sweet 1 Day יוצרות ערוצי מעבר חמצן שמאפשרות הרכבה בטוחה לאורך היום תוך שמירה מרבית על בריאות העין. העדשות כוללות מסנן UV ברמת Class 1 להגנה אופטימלית.

המבנה האספרי של עדשות Ophthalmic Sweet 1 Day מאפשר ראייה טובה וחדה באיכות HIGH DEFINITION, כאשר עובי הדק של מרכז העדשה (54 מיקרון בגרסה הספרית ו-68 מיקרון בגרסה הפרוגרסיבית) מאפשר נוחות מרבית לאורך כול היום.





העדשה מולטיפוקל היומית הראשונה
עם ארבעה ADDITIONS להתאמה קלה ותואמת
למספר של המשקפיים !

Innofilcon A with S'WET TECHNOLOGY	חומר גלם
Class 1 UV Filter	חסימת UV
45%	תכולת מים
כן	גורם לחות
5	סיווג FDA
45%	תכולת מים
Mpa 0,45	מודול יאנג (מקדם קשיחות)
70	DK
Molding	שיטת ייצור
אספרית ופרוגרסיבית עם מוקד ראייה קרובה מרכזי	גיאומטריה
0,068	עובי המרכז
103	DK/t
קוטר 14.20 מ"מ	קוטר
8.60 מ"מ	קימור בסיס
-4.75 עד +4.75 בקפיצות של 0.25D -12.00 עד 5.00 בקפיצות של 0.50D +5.00 עד +6.00 בקפיצות של 0.50D	טווח מספרים (דיופטר)
add max1.25 D add max1.75 D add max2.25 D add max2.75 D	Addition
יומי - חד פעמי	שימוש
החלפה כל יום	תדירות החלפה
30 או 90 עדשות מגע	אריזה



עדשות OPHTALMIC SWEET 1 DAY SPHERIC לתיקון קוצר או רחוק
ראייה משלבות את הטכנולוגיה SWEET TECHNOLOGY יחד עם HD
DESIGN לראייה חדה ונוחות לאורך כל היום

Innofilcon A with S'WET TECHNOLOGY	חומר גלם
Class 1 UV Filter	חסימת UV
45%	תכולת מים
כן	גורם לחות
5	סיווג FDA
45%	תכולת מים
Mpa 0,45	מודול יאנג (מקדם קשיחות)
70	DK
Molding	שיטת ייצור
א-ספרית	גיאומטריה
0,054	עובי המרכז
DK/t 130	עבירות חמצן
קוטר 14.20 מ"מ	קוטר
-5.75 עד +6.00 בקפיצות של 0.25D -12.00 עד 6.00 בקפיצות של 0.50D +6.00 עד +8.00 בקפיצות של 0.50D	טווח מספרים (דיופטר)
יומי - חד פעמי	שימוש
החלפה כל יום	תדירות החלפה
30 או 90 עדשות מגע	אריזה

OPHTALMIC Sweet®

עדשות מגע דו-שבועיות מסיליקון הידרוג'ל

סדרת עדשות מגע Ophtalmic Sweet נותנת מענה לכל אמטרופיה רגילה (קוצר או רחוק ראייה, אסטיגמציה ופרסביופיה) בזכות שילוב הטכנולוגיות והחומרים החדשניים ביותר בתחום. עדשות Ophtalmic Sweet עשויות מסיליקון הידרוג'ל חדשני המאפשר מעבר חמצן מקסימלי לקרנית. העדשות מכילות סודיום היאלורונט הידוע בפעולתו המרגיעה. החלפה דו-שבועית מונעת שחיקה של העדשות לטובת שמירה מירבית על בריאות העין והמשך הרכבה נוחה לאורך זמן.

התאמה מהירה וקלה



OPHTHALMIC
sweet
TORIC




יציבות דינמית

חומר גלם	Innofilcon A עם סודיום היאלורונט
סיווג FDA	5
תכולת מים	45%
מודולוס (מקדם קשיחות)	Mpa 0.6
Dk	70
שיטת ייצור	Molding
גיאומטריה	צד קדמי moncurve עם מערכת ייצוב דינמית
עובי המרכז	0.093 מ"מ
Dk/t (דיופטר)	75
קוטר	14.20 מ"מ
קימור בסיס	8.60 מ"מ
טווח מספרים (דיופטר)	6.00 עד - 9.00 בקפיצות של 0.50D 5.75 עד + 6.00 בקפיצות של 0.25D צילינדר: 1.25D - 4.75D - 2.25D - אקסס 10° עד 180° בקפיצות של 10°
התאמה	7,40 mm ≤ Km ≤ 8,10 mm
שימוש	יומי
תדירות החלפה	החלפה דו שבועית
אריזה	6 עדשות מגע
ניקוי ותחזוקה	תמיסה רב תכליתית לעדשות מגע או תמיסת פרוקסיד (מי חמצן) מאושרת לניקוי עדשות מגע

OPHTHALMIC
sweet
PROGRESSIVE



התאמה מולטיפוקל קלה ופשוטה כמו משקפיים בזכות 4 ADDITIONS

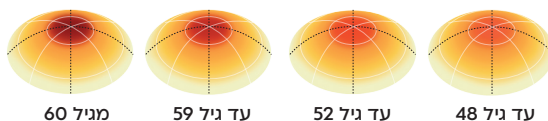

חומר גלם	Innofilcon A עם סודיום היאלורונט
סיווג FDA	5
תכולת מים	45%
מודולוס (מקדם קשיחות)	Mpa 0.6
Dk	70
שיטת ייצור	Molding
גיאומטריה	א-ספרית ופרוגרסיבית עם אזור ראייה קרובה מרכזי
עובי המרכז	0.07 מ"מ
Dk/t (דיופטר)	100
קוטר	14.20 מ"מ
קימור בסיס	8.60 מ"מ
טווח מספרים (דיופטר)	6.00 עד + 6.00 בקפיצות של 0.25D 6.00 עד - 12.00 בקפיצות של 0.50D +6.00 עד +8.00 בקפיצות של 0.50D
התאמה	7,40 mm ≤ Km ≤ 8,10 mm
Addition	Add max. 1.25D Add max. 1.75D Add max. 2.25D Add max. 2.75D
שימוש	יומי
תדירות החלפה	החלפה דו שבועית
אריזה	6 עדשות מגע
ניקוי ותחזוקה	תמיסה רב תכליתית לעדשות מגע או תמיסת פרוקסיד (מי חמצן) מאושרת לניקוי עדשות מגע

OPHTHALMIC
sweet
SPHERIC



חומר גלם	Innofilcon A עם סודיום היאלורונט
סיווג FDA	5
תכולת מים	45%
מודולוס (מקדם קשיחות)	Mpa 0.45
Dk	70
שיטת ייצור	Molding
גיאומטריה	צד קדמי moncurve
עובי המרכז	0.059 מ"מ
Dk/t (דיופטר)	119
קוטר	14.20 מ"מ
קימור בסיס	8.60 מ"מ
טווח מספרים (דיופטר)	6.00 עד + 6.00 בקפיצות של 0.25D 6.00 עד - 12.00 בקפיצות של 0.50D +6.00 עד +8.00 בקפיצות של 0.50D
התאמה	7,40 mm ≤ Km ≤ 8,10 mm
שימוש	יומי
תדירות החלפה	החלפה דו שבועית
אריזה	6 עדשות מגע
ניקוי ותחזוקה	תמיסה רב תכליתית לעדשות מגע או תמיסת פרוקסיד (מי חמצן) מאושרת לניקוי עדשות מגע